

Entretien et hygiène


de votre canule de trachéotomie



Chaque jeu de canules est composé de 3 pièces :

- La canule externe (placée directement dans la trachée)
- La canule interne (s'emboîte dans la précédente)
- Le mandrin (utilisé uniquement lors de l'insertion de la canule externe)

Pour les canules argent ou acrylique, vous devez retirer **à chaque fois**, la chemise interne, la valve de phonation, le raccord O2 et le mandrin ; ainsi qu'après chaque utilisation, le bocal d'aspiration de mucosités.

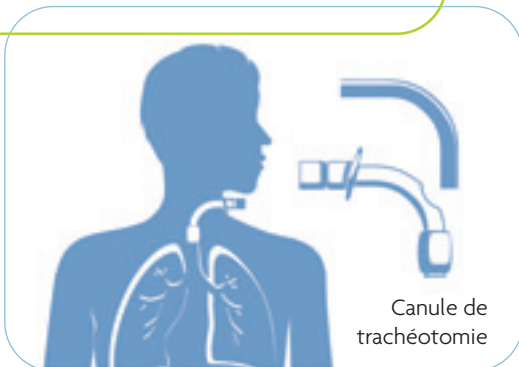

Ce sont deux étapes distinctes et obligatoires !

Le nettoyage à chaque change de canule et la désinfection

- Se laver les mains.

NETTOYAGE

- Tremper pendant 15 minutes dans un récipient contenant le produit **BACTINYL SAVON LIQUIDE INSTRUMENTATION** (2 doses pour un litre d'eau froide du robinet). Solution à renouveler à chaque opération.
- Laver le matériel sur toutes les surfaces lisses et brosser dans les anfractuosités (à l'aide d'une brosse), rincer à l'eau courante froide du robinet, égoutter, sécher, stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri de la poussière.

DÉSINFECTION

- Tremper pendant 1 heure dans un récipient contenant le produit **BACTINYL 5M** (2 doses pour un litre d'eau froide du robinet).
- Rincer à l'eau courante froide du robinet, égoutter, sécher avec un support propre ou par égouttage, stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri de la poussière.

Entretien et hygiène de votre canule de trachéotomie

Aspirateur de mucosité

Conseils concernant vos aspirations

- Remplir les 2 flacons plastiques (contenance du flacon 1 litre)
- 1 avec de l'eau bouillie refroidie ou de l'eau stérile
- 1 avec de l'eau bouillie ou de l'eau stérile contenant 2 sachets de **BACTYNIL 5M** (2 doses pour 1 litre d'eau froide du robinet)

Conseils d'hygiène

Après vous être aspiré

- Essuyer la sonde extérieurement avec une compresse sèche.
- Aspirer de l'eau dans le flacon contenant de l'eau bouillie refroidie pour rincer l'extérieur de la sonde.
- Laisser tremper la sonde dans le flacon contenant le désinfectant après avoir aspiré un peu de ce désinfectant.
- Avant l'aspiration suivante, aspirer de l'eau du flacon contenant de l'eau bouillie refroidie pour rincer la sonde et la sécher à l'aide d'une compresse et faire l'aspiration.

Ces précaution d'hygiène élémentaires, faciles à réaliser, suffisent à éviter les infections.

1 SONDE PAR DEMI-JOURNÉE :

Les sondes d'aspirations de mucosités doivent être changées plus souvent en cas d'infection.

1 FOIS PAR SEMAINE :

Le cathéter Mount est à changer.



En cas de problème lié au matériel contacter l'arard

Parc d'activités de Napollon - 100 av. des Templiers
13676 AUBAGNE CEDEX

Tél : 04 42 84 87 00


TOUTE L'ASSISTANCE MÉDICO-TECHNIQUE À DOMICILE

www.arard.asso.fr