



Mise en service de l'appareil :

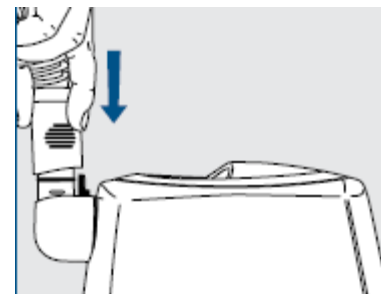

1. Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant.
2. Raccordez une extrémité du circuit respiratoire à la sortie d'air (coude à l'arrière de l'appareil) puis raccordez le masque à l'autre extrémité du circuit respiratoire.
3. Mise en place de la chambre d'humidification :

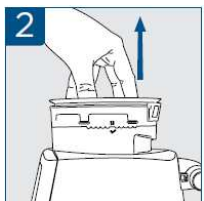


Retirer le couvercle de la chambre et saisir la poignée circulaire de la chambre d'humidification en glissant les doigts à l'intérieur. Tirer la chambre d'humidification vers le haut pour l'extraire de l'appareil.
ATTENTION : ne pas remplir la chambre d'humidification lorsqu'elle se trouve à l'intérieur de l'appareil ; la chambre d'humidification doit toujours être retirée avant d'être remplie.



Remplir la chambre d'humidification d'eau préalablement portée à ébullition jusqu'au niveau maximum marqué sur le côté.



4 Pour remettre en place la chambre d'humidification, placer la flèche située sur le dessus de la chambre face au coude.

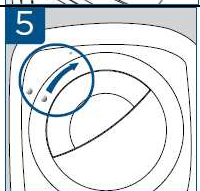

5 Mettre en place le couvercle de la chambre en alignant le gros point situé sur le couvercle sur le gros point situé sur le dessus de l'appareil. Après avoir aligné ces deux symboles, appuyer et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'aligner le gros point du couvercle sur le petit point situé sur le dessus de l'appareil. Pour enlever le couvercle de la chambre, le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


4. Pour commencer votre traitement, tournez le bouton rotatif pour que le cercle de sélection soit positionné sur le point en haut :



Appuyez sur la partie centrale du bouton rotatif pour démarrer l'appareil.

Mettez votre masque.





Pour activer la rampe, appuyez de nouveau sur le bouton rotatif et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes. Le symbole « rampe »  s'affiche sur l'écran.



Pour arrêter l'appareil, sélectionnez le point en haut du cadran et appuyez sur le bouton rotatif.

Réglages disponibles sur l'ICON :





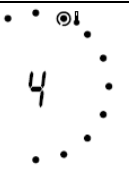

Horloge :

	<p>Tourner le bouton rotatif pour accéder au réglage de l'horloge de l'appareil , puis appuyer pour entrer dans le réglage. L'heure afficher de met à clignoter.</p> <p>Tourner le bouton pour choisir l'heure, les minutes et le réglage sur 12 ou 24 heures. Après chaque sélection, appuyer de nouveau sur le bouton central pour valider la modification.</p>
---	--

Humidification :

	<p>Pour régler le niveau d'humidité fourni au masque, tourner le bouton jusqu'au réglage de l'humidité . Appuyer pour valider et tourner de nouveau le bouton pour choisir le niveau d'humidité voulu, entre 0 (éteint) et 7 (maximum). Appuyer de nouveau pour valider la modification.</p> <p>REMARQUE : le réglage par défaut de l'humidité est 4. Pour une utilisation sans humidité, régler le niveau d'humidité sur zéro. Le niveau d'humidité ne peut pas être ajusté si le mode ECO est activé.</p>
---	--

Alarme :

	<p>Tourner le bouton pour accéder au réglage de l'alarme , appuyer pour valider, puis tourner pour sélectionner Marche  ou Arrêt . Appuyer de nouveau pour valider la modification.</p> <p>Si l'alarme est activée, tourner le bouton pour sélectionner la sonnerie.</p> <p>Appuyer une fois sur le bouton pour arrêter l'alarme et la refaire sonner 10 minutes plus tard ; appuyer deux fois sur le bouton pour éteindre complètement l'alarme.</p>
	<p>Heure de l'alarme :</p> <p>Tourner le bouton pour accéder au réglage de l'heure de l'alarme , puis appuyer pour valider.</p> <p>Tourner le bouton pour choisir l'heure, appuyer pour valider. Tourner pour choisir les minutes et appuyer à nouveau pour valider la modification.</p>